

*Equipo:*

# **ELECTROCARDIOGRAFO**



**Cardio Técnica**

*Fábrica Argentina de Equipamiento Hospitalario*




*Modelo: RG-401plus*

Equipo:

# ELECTROCARDIOGRAFO

Modelo: RG-401plus

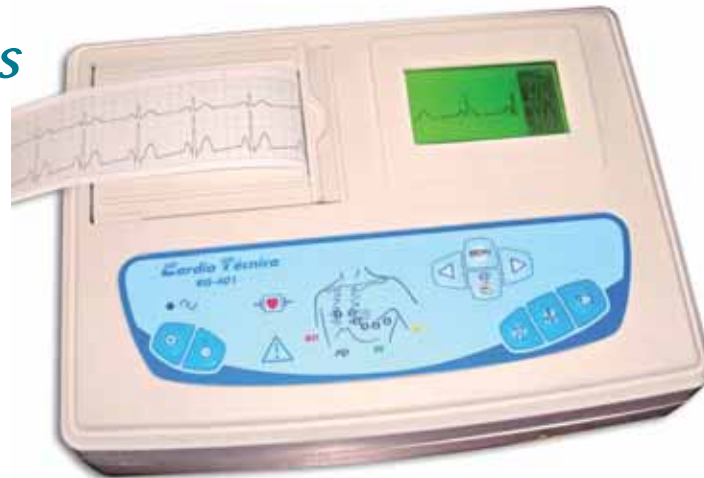

## Especificaciones Técnicas *Modelo: RG-401plus*



### Accesorios

- Bolso porta equipo.
- Cable paciente.
- Cable de alimentación.
- Cable para descarga a tierra.
- Juego de pinzas portaelectrodos (4).
- Juego de electrodos precordiales (6)
- Pote de gel.
- Rollo de papel termosensible.
- Manual de uso.

- Selección de modo 1, 2 o 3 canales
- Comandos digitales por teclado de membrana.
- Inscripción por matriz térmica de punto de alta definición.
- **Modos:** Manual y Automático.
- Pantalla de LCD para visualización de datos y de la señal cardiaca.
- Salida para conexión a PC, software opcional
- Dos velocidades de impresión, 25 y 50mm/seg.
- Selección de tipo de impresión.
- Sensibilidad 1/2, 1 y 2 cm. /mv. Autogancia.
- Fuente aislada ópticamente.
- Gabinete inyectado en plástico de alta rigidez mecánica.
- Alimentación 110/120 VCA.
- Baterías recargables con cargador incluido.
- Menú en tres idiomas.
- **Papel de registro:** 50mm x 30m.
- Calibración 1Mv +/- 5%
- Filtro 50-60Hz
- Derivaciones I, II, III aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
- **Circuito Paciente:** Preamplificador con entrada flotante optoacoplada protegida contra descargas de desfibriladores.
- **Dimensiones:** 270 x 200 x 80 mm.
- **Peso:** 1,80kg. Con baterías incluidas.